



Kenmerken

- Bevat de toevoeging, AquAtract™, welke zorgt meer en langer draagcomfort.
- Bevat Natrium Hyaluronate.
- Advanced Edge Technology®; gepatenteerd proces dat ontwerp- en productieparameters tot het niveau toepast van 4 decimalen. De lensrand is zo dun en accuraat dat de lens extreem comfortabel is.
- Reproduceerbaar proces.
- UVA en UVB-bescherming.
- Handlingstint.
- Hoge mate van succes bij re-fitting.
- Exclusief verkrijgbaar via de professionele oogzorg.

Voordelen

- Zorgt ervoor dat het water beter aan de lens hecht gedurende de draagperiode.
- Een natuurlijk ingrediënt met waterbindende en vochtregulerende deeltjes welke zorgdraagt voor een direct merkbaar lens comfort.
- Zorgt voor superieur comfort en gemak voor de drager.
- Drager ontvangt iedere keer dezelfde hoge kwaliteit lenzen.
- Bescherm het oog voor schadelijke UV-straling.
- Gemak voor de drager bij het inzetten.
- Het optimale design zorgt voor het probleemloos overstappen van andere disposables.
- Herhalingsaankopen blijven via de professionele oogzorg en niet buiten het optiekkanaal.

bioclear™ 1 Day Bevat AquAtract™ voor superieur draagcomfort

+8.00 t/m -10.00

Productspecificaties:

MATERIAAL	FILCON IV 1 + AquAtract™
WATERGEHALTE	55 %
PRODUCTIEPROCES	ADVANCED EDGE TECHNOLOGY®
BASISCURVE	8.6mm
DIAMETER	14.1mm
STERKTEBEREIK	-0.50 tot -6.00 (0.25 stappen) -6.50 tot -10.00 (0.50 stappen) +0.50 tot +6.00 (0.25 stappen) +6.50 tot +8.00 (0.50 stappen)
MIDDENDIKTE (@ -3.00 DS)	0.07mm
DK	21
DK/t (@ -3.00 DS)	30
OPTISCHE ZONE	9.00mm
HANDLINGSTINT	AQUA
VERPAKKING	30 Pack
UV BLOCKER	UVA en UVB-bescherming

Advanced Edge Technology AET®

Advanced Edge Technology® is het gepatenteerd proces dat ontwerp- en productieparameters tot het niveau toepast van 4 decimalen. De lensrand is zo dun en accuraat dat de lens extreem comfortabel is.

bioclear™ 1 Day

Bevat AquAtract™ voor superieur draagcomfort


Klinische resultaten*

Een van de meest belangrijke eisen die een patiënt vandaag de dag stelt aan contactlenzen is comfort. bioclear™ 1 Day is ideaal voor patiënten die tijdens het dragen van lenzen last hebben van droge ogen en irritatie.

Superieur draagcomfort

De toevoeging AquAtract™ is een monomeer bestanddeel. AquAtract™ verbindt watermoleculen aan het lensoppervlak en dit proces zorgt ervoor dat uitdroging van het lensoppervlak wordt tegengehouden.

Het draagcomfort wordt hiermee verhoogd en de vervuiling van de lens beduidend minder. Het uiteindelijke resultaat hiervan is dat de lenzen een langere draagtijd hebben met een comfortabeler draagcomfort.

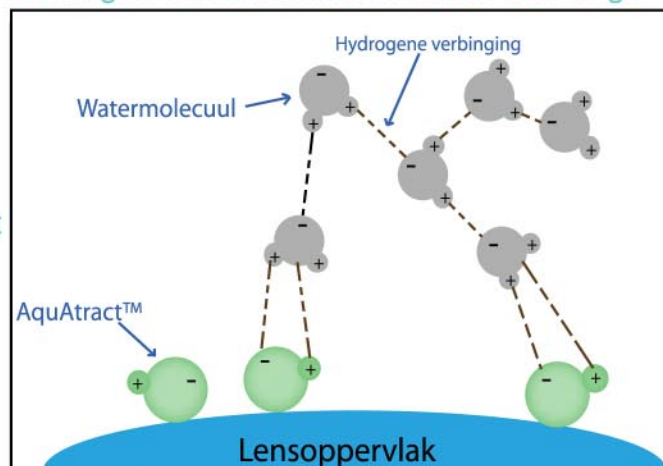

Direct comfort door Hyaluron

bioclear™ 1 Day lenzen zijn ondergedompeld in fysiologische zoutoplossing welke met Hyaluron verrijkt is. Hyaluron heeft de eigenschap grote hoeveelheden water aan zich te binden. In combinatie met bioclear™ 1 Day betekent dat, dat het hoornvlies al meteen bevochtigd wordt tijdens het inzetten van de lenzen en zo een optimaal comfort bereikt wordt. Dit alles maakt het mogelijk om een betere aanpassing en minder droge ogen te realiseren.

Verbeterde draagperiode



Onafhankelijke klinische studies hebben aangetoond dat patiënten in staat zijn bioclear™ 1 Day een langere tijd te dragen dan andere hydrogel lenzen gezien het constante comfort tijdens de draagperiode

Makkelijk hanteerbaar

Testen bewezen dat bioclear™ 1 Day zich niet hecht aan het oog of uitdroogt tijdens het dragen. bioclear™ 1 Day bereikt hiermee in vergelijking tot Focus Dailies All Day Comfort een beter resultaat.

Optimaal comfort

De algehele indruk van bioclear™ 1 Day is dan ook dat deze vergelijkbaar is met het comfort van producten van marktleiders waarbij bioclear™ 1 Day zich dan nog extra onderscheidt door een goede handling en UV-bescherming.

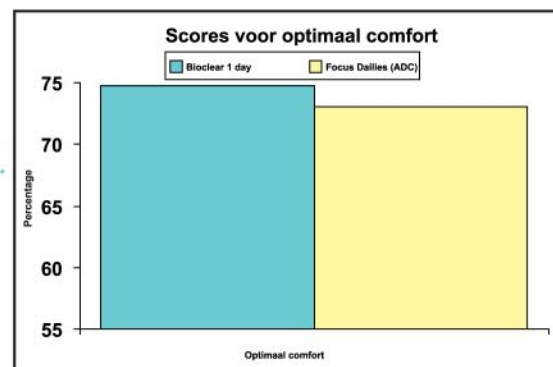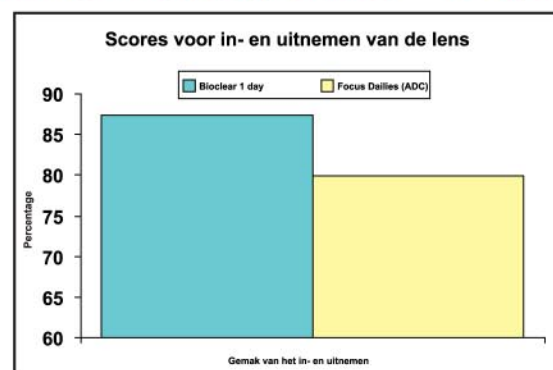

*Klinische data afgeleid van studies uitgevoerd door de wereldwijd gerespecteerde en onafhankelijke Clinical Research Group.